

Vibrační masážní pás TL-2004B

Návod k použití



Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

Úvod

Nejprve vám chceme poděkovat za nákup tohoto masážního vibračního pásu. Věříme, že s ním budete spokojeni a že vám pomůže dosáhnout perfektní a okouzlující postavy.

Tento speciální formující masážní pás je skvělým pomocníkem při hubnutí a formování vaší postavy. Nejefektivnější hubnutí není totiž založené na hladovějící dietě ale na pravidelném cvičení, které zajistí transformování tukových buněk na svaly. A právě tento vibrační pás TL-2004B je vysoce účinný při přetváření podkožních tukových buněk na svalové. Díky němu tak můžete zhubnout a získat tak vámi požadovanou postavu aniž byste museli denně chodit do drahých posiloven nebo jiných fitness center.

Vysoká účinnost a oblíbenost tohoto formujícího masážního pásu TL-2004B není žádný zázrak, ale vychází z kombinace několika moderních technologií, které bývají většinou nabízeny několika samostatnými a zbytečně drahými přístroji. Při výrobě tohoto elektronického pásu tedy byly zkombinovány mnohaleté zkušenosti z oblasti formování postavy s nejmodernějšími bio- i elektro- technologiemi, kterými jsou konkrétně unikátní systém pěti vibračních motorů, bio-magnetické pole generované dvaceti silnými magnety a technologie infračerveného záření zajišťující hloubkové prohřívání lidských buněk. Pro uspokojení i těch nejnáročnějších uživatelů nabízí tento masážní pás 8 různých druhů nastavitelných programů, které odbourávají tuk a produkují silné vibrace, které pronikají do hloubky tukové vrstvy.

Díky speciálním prsním stimulátorům dokáže přístroj efektivně masírovat tři body hrudníku a tím urychluje krevní oběh, což podporuje růst prsních žláz. To má za následek formování a zpevňování prsou. Další skvělou funkcí je přídatný masážní pás na paže a nohy. S tímto přídatným pásem tak můžete snadno provádět masáž a tvarování svalů na rukou nebo nohou. Přídatný masážní pás s pomocí speciální elektronické technologie generuje slabý nízko-frekvenční elektrický proud, který působí na kůži lidského. Toto slabé elektrické pole simuluje přirozené nervové signály lidského těla a tím hloubkově stimuluje buňky částí těla, kde je přiložen masážní pás. Tato stimulace má obdobný efekt jako klasické cvičení, což vede ke zlepšení krevního oběhu, zvyšování hustoty

Vibrační masážní pás TL-2004B

svalové hmoty (posilování) a také k rychlému hubnutí a formování rukou a nohou.

Přehled hlavních funkcí jednotlivých komponentů

Vibrační masážní pás

Odtučňující vibrační mechanismus, který je ukryt uvnitř pásu TL-2004B, je tvořen pěti speciálně navrženými vibračními motory, které byly vytvořeny na základě přesné analýzy stavby a struktury lidského těla, zejména pak částí břicha, pasu a zad. Tyto vysoce-rychlostní vibrační motory dokáží produkovat silné vibrační vlny, které prostupují hluboko pod kůži, kde stimulují tukové buňky. Stimulované tukové buňky se zahřívají a tím dochází ke spalování nežádoucího tuku a místo něho se vytváří svalové buňky. Vibrační motory dokáží vytvářet vibrační pohyb s rychlostí až 5800 otáček/minutu. Díky ovládacímu panelu je možné vybírat mezi osmi různými vibračními programy s různou technikou a intenzitou vibrační masáže (kruhový režim, intervalový režim, režim mačkání prsty, vibrační režim, bušící režim, škrábavý režim, bodový nebo kombinovaný režim). Každý režim zajišťuje odlišnou techniku vibrační masáže, což znamená, že si každý může najít režim, který mu nejvíce vyhovuje.



Extra silné bio-magnety

Dvacet extra silných magnetů, které jsou rozmístěny po celém pásu, vytváří silné magnetické pole kolem vašeho těla. Toto magnetické pole hloubkově působí na magnetická pole uvnitř každé buňky a pozitivně upravují magnetickou rovnováhu, která je velice důležitá pro správné fungování každé buňky lidského organismu. Zmíněná metoda se nazývá magnetoterapie, což je moderní léčebná technika, která je často nazývána léčebnou metodou 21. století. Kromě této léčebné funkce je magnetické pole skvělé pro formování postavy také z toho důvodu, že



Vibrační masážní pás TL-2004B

napomáhá rychlému a účinnému rozkladu tukových buněk, což samozřejmě vede k jejich odstraňování.

Léčba pomocí hřejícího infračerveného záření

Další moderní technologií, která je integrována uvnitř masážního pásu TL- 2004B je technologie hloubkového infračerveného záření. Toto infračervené záření (FIR) dokáže hloubkově působit na buňky uvnitř lidského těla. Jeho léčivé účinky jsou již známy několik desetiletí a jsou také podloženy řadou vědeckých výzkumů. Z pohledu hubnutí a formování postavy je působení FIR záření výjimečné zejména proto, protože dokáže přímo prohřívát i hluboko uložené tukové buňky, čímž se ještě více zvyšuje rychlost jejich rozkladu a odbourávání. Infračervené záření je nápomocné také jako prevence proti nesprávnému hubnutí vlivem nějak poruchy organismu.



Speciální magnetické stimulátory pro tvarování prsou

Spolu s masážním pásem jsou součástí balení také speciální stimulátory, které se nasazují pod prsní svaly (podobně jako podprsenka). Tyto stimulátory jsou napojené na hlavní jednotku a díky ní dokáží vytvářet magnetické vibrační pole, které stimuluje tři hlavní akupunkturální body v oblasti hrudníku (Qimen, Tianchi, Shanzhong). Vibrační magnetická masáž zvyšuje krevní oběh v oblasti prsních svalů, což vede k růstu prsních žláz a také k efektivnímu zvětšování a formování poprsí. Pomocí těchto magnetických stimulátorů tak můžete dosáhnout ideálně tvarovaného a působivého poprsí.



Masážní pás na ruce a nohy

Dalším příslušenstvím, které zvyšuje potenciál využití tohoto formujícího masážního pásu je masážní pás na ruce a nohy. S tímto přídatným pásem tak můžete snadno provádět masáž a tvarování svalů na rukou nebo nohou. Přídatný masážní pás s pomocí speciální elektronické technologie generuje slabý nízkofrekvenční elektrický proud, který působí na kůži lidského. Toto slabé elektrické pole simuluje přirozené nervové signály lidského těla a tím hloubkově stimuluje buňky částí těla, kde je přiložen masážní pás. Tato stimulace má obdobný efekt jako klasické cvičení, což vede ke zlepšení krevního oběhu, zvyšování hustoty svalové hmoty (posilování) a také k rychlému hubnutí a formování rukou a nohou.



Obsah balení

Jako první věc po vybalení přístroj z krabice proveďte kontrolu obsahu balení. Pokud zjistíte, že některá část chybí nebo je viditelně poškozena, pak okamžitě kontaktujte výrobce.


Obsah balení:

- 1x masážní pás
- 2x prsní stimulátor (1 pár)
- 1x přídatný masážní pás na ruce a nohy
- 1x dobíjecí adaptér AC 230V
- 1x dobíjecí auto-adaptér DC 12V
- 2x baterie 3V, typ CR2032

Popis ovládacího panelu



Popis ovládacího panelu pro přídatný masážní pás

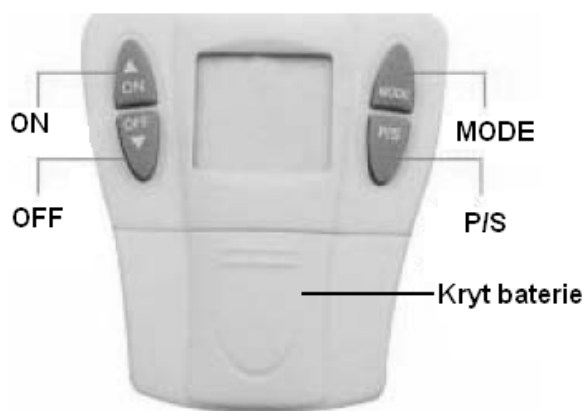

Instrukce k používání masážního pásu

- Po vybalení masážního pásu z krabice a přečtení návodu k použití můžete začít s jeho používáním. Pás si připevněte k tělu a upevněte pomocí suchých zipů. Pás by neměl být volný, ale ani příliš utažený.
- Připojte napájecí kabel.
- Pokud chcete používat i prsní stimulatory, pak je připojte do zdířky na ovládacím panelu označené „Ω“.
- Před spuštěním samotné masáže je třeba zadat informace o uživateli (hmotnost a pohlaví) a nastavit parametry masáže (masážní režim, typ masáže, doba masáže a intenzita).
- Jednotlivá nastavení parametrů masáže se provádí pomocí tlačítek **SETTING** a **AJUST**. Po stisku tlačítka **SETTING** začne na displeji blikat číslo masážního režimu (MODE). Dalším stiskem tlačítka **SETTING** bude blikat typ masážní funkce (FUNCTION). Dalším stiskem tlačítka **SETTING** lze přepínat mezi nastavením zbylých parametrů v pořadí: vyhřívání (HEATING), čas (TIME), hmotnost (WEIGHT), intenzita (INTENSITY), pohlaví (GENDER). Tlačítkem **AJUST** je možné měnit hodnotu aktuálně nastavovaného parametru.
 - Režim masáže:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat číslo masážního režimu (MODE). Poté opakovaným stiskem tlačítka **AJUST** vyberte některý z 8 masážních programů. Každý režim je označen číslem, které je zobrazeno na displeji. Masážní program číslo „0“ označuje automatický režim, kdy se střídá všech 8 režimů. Výběr režimu masáže je možné provádět také pomocí tlačítka **MODE**.
 - Typ masážní funkce:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat typ masážní funkce (FUNCTION). Poté opakovaným stiskem tlačítka **AJUST** vyberte některý ze 3 typů masážních funkcí. K dispozici jsou funkce hubnutí (FAT REDUCING), zpevňování hrudníku (BREAST ENLARGING) a hubnutí se zpevňováním hrudníku zároveň (FAT

REDUCING, BREAST ENLARGING TOGETHER). Název zvoleného typu masážní funkce je zobrazen na LCD displeji.

- c. **Vyhřívání:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat ikona funkce vyhřívání (HEATING). Poté pomocí tlačítka **AJUST** funkci vyhřívání zapněte (ikona vyhřívání je zobrazena) nebo vypněte (ikona není zobrazena). Do dvou minut přístroj dosáhne konstantní teploty 45°C.
 - d. **Doba masáže:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat nastavená doba masáže (TIME). Poté pomocí tlačítka **AJUST** nastavte požadovanou dobu masáže. Každý stisk tlačítka **AJUST** znamená posun o 5 minut. Rozsah nastavení je 0 – 40 minut. Symbol „FF“ označuje vypnutý časovač. Po uplynutí nastavené doby se masáž automaticky zastaví.
Dobu masáže je možné nastavovat také pomocí tlačítka **TIME**.
 - e. **Hmotnost:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat nastavená hmotnost uživatele (WEIGHT). Poté pomocí tlačítka **AJUST** nastavte správnou hmotnost uživatele. Rozsah nastavení je 0 – 99kg.
 - f. **Intenzita masáže:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat nastavená úroveň intenzity masáže (INTENSITY). Poté pomocí tlačítka **AJUST** nastavte požadovanou intenzitu. K dispozici je 8 úrovní intenzity od nejnižší po nejvyšší.
Intenzitu masáže je možné nastavovat také pomocí tlačítka **INTENSITY**.
 - g. **Pohlaví:** Stiskem tlačítka **SETTING** dospějete do stavu, kdy bude blikat nastavené pohlaví uživatele (GENDER). Poté pomocí tlačítka **AJUST** nastavte správné pohlaví – FEMALE (žena), MALE (muž).
6. Po nastavení parametrů masáže spusťte masáž stiskem tlačítka **POWER**.
 7. Ukončení masáže se provede automaticky po uplynutí doby masáže nebo je možné masáž zastavit ručně opět stiskem tlačítka **POWER**.

8. Výrobek používejte maximálně dvakrát denně po dobu 20 – 40 minut.
9. Po použití výrobku vypijte sklenici převařené vody nebo džusu, tím zajistíte lepší účinek. Výrobek by měl být používán pravidelně.

Používání stimulátorů pro formování prsou

Při užívání stimulátorů pro formování prsou nejprve připojte konektor napájecího kabelu stimulátorů do zdířky na ovládacím panelu označeném „Ω“. Samotné stimulátory pak vložte do podprsenky pod prsa. Další nastavení parametrů masáže a ovládání je stejné jako při používání masážního pásu (viz. předchozí kapitola).

Instrukce pro používání přídatného masážního pásu pro masáž rukou a nohou.

1. Přídatný masážní pás slouží pro masáž rukou nebo nohou.
2. Přídatný masážní pás je napájen pomocí dodávané baterie (CR2032). Baterie je umístěna v ovládacím panelu přídatného pásu pod displejem. Pro vložení baterie je třeba nejprve odsunout kryt baterie. Poté vložte baterii. Při jejím vkládání dbejte na její správnou polaritu, kladný pól (+) musí být nahoře. Poté opět zasuňte kryt baterie.
3. Na masírované místo a také na vnitřní stranu masážního pásu naneste masážní gel, který zlepšuje účinek masáže. (gel není součástí balení, lze použít masážní gel, který je běžně k dostání v lékárnách)
4. Poté masážní pás připevněte k masírované části pomocí dodávaných pásků se suchým zipem (malý na ruce, větší na nohy). Nyní je přídatný masážní pás připraven k masáži.
5. Přídatný masážní pás se zapíná stiskem tlačítka „ON“.

Vibrační masážní pás TL-2004B

6. Poté pomocí tlačítka „**MODE**“ vyberte některý z 8 masážních režimů. Jednotlivé režimy jsou rozděleny podle části těla nebo podle techniky stimulace. Každý režim je signalizován jiným symbolem na LCD displeji.
7. Během masáže je možné měnit její rychlost (SPEED) nebo intenzitu (POWER). Každý režim je odlišný, proto je možné u některého režimu měnit pouze jeho rychlost a u jiného zase pouze jeho intenzitu. Zvyšování intenzity se provádí opakovaným stiskem tlačítka „**ON**“ a snižování pomocí tlačítka „**OFF**“. Intenzita (rychlost) masáže může být nastavována v celkem 10 stupních a nastavená úroveň je signalizována horizontálními čarami na LCD displeji.
8. Tlačítko „**P/S**“ slouží pro spuštění automatického masážního programu, kdy se během 15 minut automaticky vystřídá všech 8 masážních režimů.

Vibrační masážní pás TL-2004B

9. Masáž se ukončí automaticky po uplynutí doby 15 minut (přednastavená doba časovače), nebo je ji možné vypnout ručně pomocí tlačítka „**OFF**“. Opakovaným stiskem tlačítka „**OFF**“ se postupně snižuje intenzita masáže a posledním stupněm je úplné zastavení masáže. Další stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí přídavného masážního pásu. Masážní pás by neměl být používán bez přestávky déle jak 15 minut.
10. Po skončení masáže sundejte masážní pás.

Údržba

Pro čištění masážního pásu použijte jemný kus látky a mýdlo nebo běžný čistící prostředek s vodou. Masážní pás nikdy nenamáčejte, látku pouze lehce navlhčete. Pás nikdy neperte v automatické pračce a nesušte v sušičce. Po vyčištění je třeba nechat všechny části masážního pásu důkladně vyschnout.

Technické parametry

Model:	TL-2004B
Napájení:	AC 230V / 50Hz, DC 12V (auto adaptér)
Maximální rychlost vibračních motorů:	5800 ot./min
Proud při klidovém režimu:	max. 100mA
Proud při práci:	max. 1600mA
Hluk:	max. 50dB
Teplota vyhřívání:	max. 50°C



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759