


Čistič pórů MC0158

Návod k použití



Děkujeme vám za zakoupení **Čističe pórů**. Čistič pórů vám pomůže udržet čistou, zdravou, zářící pokožku bez nevzhledných černých teček a zanícených pupínků. Hluboké pronikavé sání čistí i pod povrchem. Už žádné vymačkávání, vytahování nebo poškozování vaší pokožky.

Pokožku teď nemusíte mačkat, zabráníte tak tvorbě modřin, stroupků a následných jizviček. Čistič pórů vám zanesené póry vyčistí bez poranění okolní tkáně a pokožku zanechá čistou a hladkou.

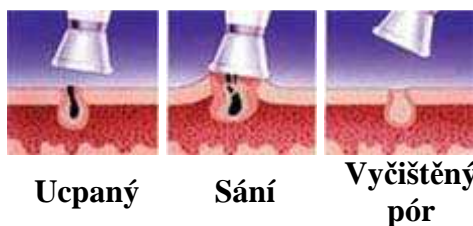

Čistič pórů nabízí

- Ergonomicky navržený sací nástavec se dvěma koncovkami o různé velikosti
- Praktický design se zrcátkem a jehlou na ucpané póry.


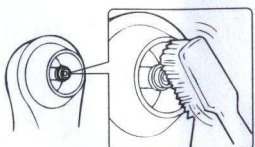

Vložení baterií

- 1) Bateriový prostor je umístěn na zadní straně ve spodní části přístroje. Jednoduše postupujte podle náčrtku na přístroji „pro otevření otočit“
- 2) Vložte 2 AA baterie. Ujistěte se, že polarita souhlasí se směrem polarity vyryté na okraji bateriového prostoru.
- 3) Bateriový prostor nyní zavřete tak, aby se šipky na zadní straně přístroje setkaly.

Použití

- 1) Pro dosažení lepších výsledků používejte čistič pórů po sprchování/ koupeli nebo po umytí tváře a osušení teplým ručníkem. Pokožka bude teplem uvolněná a póry rozšířené.
- 2) Z pleti odstraňte veškerý make-up a jiné kosmetické přípravky.
- 3) Pokožku nejdříve zvlhčete malým množstvím vody, aby mohl sací nástavec co nejlépe přilnout k pokožce.
- 4) Nejdříve nasadte širší nástavec, zapněte přístroj a vyčistěte celý obličej. Pohybujte sacím nástavcem pomalu po celém obličejí vždy směrem ze středu ven.
- 5) Poté přístroj vypněte, obraťte nástavec na užší koncovku a vyčistěte pokožku na nose. Kůže po stranách nosu je velmi tenká, proto nepoužívejte čistič pórů v této zóně déle než 2 min.
- 6) Při používání sacího nástavce nedržte přístroj na jednom místě déle než 10 vteřin, aby nedošlo k nadměrnému namáhání kapilár a vzniku drobných podlitin.
- 7) Otřete obličej a naneste na pleť zvlhčující krém nebo přípravek, který obvykle používáte. Doporučujeme pleť udržovat dostatečně hydratovanou.
- 8) Doporučujeme používat přístroj 2-3x týdně.

Čištění

	1) Umyjte hlavici ve vodě
	2) Kartáčkem očistěte zbylé nečistoty.
	3) Vysušte přístroj pomocí vatové kuličky nebo hygienického kapesníčku.

Doporučení

- 1) Nepoužívejte na zanícených, infikovaných místech nebo na popraskané kůži.
- 2) Nezapomeňte vyjmout baterie po ukončení používání vašeho Čističe pórů.
- 3) Doporučujeme používat alkalické baterie k zajištění lepších výsledků.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol.s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

Tel: 549 245 575, 602 766 759